



SL-450

Ihr Begleiter am Tatort

Lange Beleuchtungszeit am Tatort

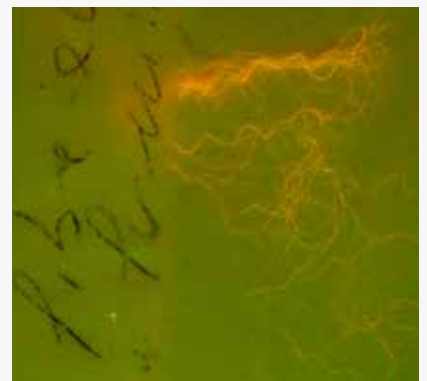

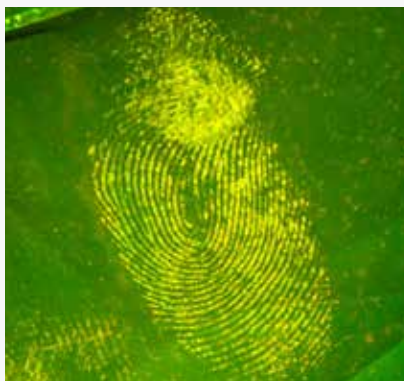

Die netzunabhängige, hochintensive und handliche Tatortleuchte SL-450 verfügt über eine leistungsstarke Xenon-Lampe mit einer Betriebsdauer von 90 Minuten. Der Praktiker wird begeistert sein vom einfachen Handling und den vielen Einsatzmöglichkeiten sowie von der Lichtausbeute.

Anwendung

Die SL-450 ist leicht und tragbar und ermöglicht dadurch einen maximalen Einsatz vor Ort für die Suche und Sicherung von serologischen Spuren, latenten und eingestaubten Fingerprints, Schuhspuren, Fasern, etc.



Vorteile

- ✓ Hohe UV Intensität
- ✓ Herausragende Lichtleistung vergleichbar mit einer 300W Standardlampe
- ✓ 7 eingebaute Spektralbereiche
- ✓ Lichtspot: in 2 m Distanz ca. 650 mm
- ✓ Optionales Zubehör wie Querschnittwandler und Strahlaufweiter und Filter für Lichtreduktion
- ✓ Wartungsfrei
- ✓ Ideal für die Arbeit am Tatort und im Labor

Technische Spezifikation

- SL-450 Basisleuchte mit Einschub für Batterie, Gehäuse aus exloxiertem Aluminium
- Hochintensive Xenon Lampe, Lebensdauer > 1000 Stunden
- Lichtaustritt: Xenon 35W mit Reflektor und Kondensor
- Boost Funktion für erhöhte Leistung bis 45 W
- Filterscheibe mit 7 Spektralbereichen: Weisslicht, UV 365, 415, 450, 470, 505 und 530 nm (weitere Bandbreiten auf Anfrage)
- Fokussierter Lichtspot
- Akku: Lithium Ion 14.4 V, 4.3 Ah
- Ladegerät: 100-240 V AC 50/60 Hz, mit Anschluss für Zigarettenanzünder, Ladezeit ca. 90 min.
- Schutzbrillen: rot, orange, gelb und UV (transparent)
- Sperrfilter: orange (weitere auf Anfrage)
- Robuster Transportkoffer (staub- und spritzwassergeschützt)
- Gewicht: Lampe 1070 g / Akku 450 g
- Abmessungen: Gesamtlänge 345 mm

Optionales Zubehör

- Stativ
- Diverse Kamerafilter
- Querschnittwandler für Streiflicht
- Pelicase (angepasst auf Ihre Anforderungen)
- Orange Filter, aufsteckbar
- Netzanschluss für permanente Stromversorgung 100-240VAC
- Filterwechsler für Streiflicht, Strahlaufweiter und Filter für Licht Reduktion
- Teleskoparm für erleichterte Spurensuche

Projectina AG
Dammstrasse 2
CH-9435 Heerbrugg / Schweiz



projectina®